

TOST CLASSIC

STABILITÉ À L'OXYDATION



NORMES

ASTM D 943, D 2274, D 2893, D 4310, IP 157, IP 388, ISO 4263-1,2,3, ISO 12205 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Ces méthodes permettent d'évaluer le comportement au vieillissement des huiles minérales contenant des additifs antioxydants et antirouille dont la masse volumique est inférieure à celle de l'eau, et utilisées comme huiles pour turbines, comme fluides hydrauliques, et comme huiles de graissage par circulation.

Le TOST Classic est un appareil de test d'oxydation des huiles minérales inhibées, du mazout distillé et des huiles de lubrification extrême pression. Pour lui permettre de recevoir un instrument fait sur mesure, le choix est laissé à l'utilisateur de sélectionner les accessoires qui correspondent aux méthodes requises.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principales caractéristiques

- Jusqu'à 8 positions
- Capacité du bain : 30 litres
- Température de l'ambient à 125°C
- Affichage digital de la température
- Accessoires et verrerie à commander séparément

Accessoires

- REF 9416251 - Débitmètre 3 l/h air pour ASTM D 943, IP 157, ISO 4263
- REF 9416252 - Débitmètre 3 l/h oxygène pour ASTM D 2274 & D 4310, ISO 12205
- REF 9416253 - Débitmètre pour 10 l/h air pour ASTM D 2893
- REF 21696 - Cellule d'oxydation complète pour ASTM D 943, IP 157, ISO 4263 et ASTM D 2893
- REF 21697 - Cellule d'oxydation complète pour ASTM D 2274 & D 4310, ISO 12205

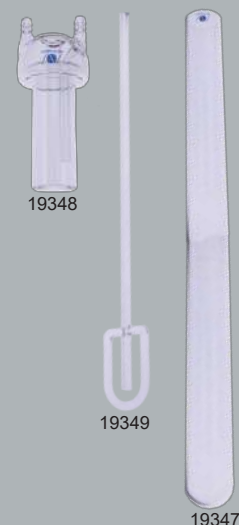

LIVRAISON

9416260

Détail de la livraison :

TOST Classic est livré avec :

- 1 thermomètre ASTM 40 C (Réf 11522)

Sans débitmètre ni verrerie

** Sans certificat, étalonnage sur demande, thermomètre digital disponible sur demande*

Conditions requises pour l'installation :

- Alimentation électrique : 230 V - 50/60 Hz - 16 A
- Dimensions : L) 610 x (l) 450 x (H) 1100 mm
- Poids : 40 kg
- **Service Pression (bar):** 0,5 bars max d'air comprimé ou d'oxygène (selon la méthode)
- **Fluide:** 30L Huile silicone

CONTACT :

vente@normalab.com (France)
sales@normalab.com (Export)

NORMALAB France SAS
76190 Valliquerville - FRANCE
Tel. : +33 232.700.100
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR